

# Pericem

## Cimento Cirúrgico SEM EUGENOL

### Indicação, Finalidade, Uso e Aplicação do Produto

É indicado como revestimento periodontal para proteção das suturas oriundas de cirurgias periodontais.

### Especificações e características técnicas do produto

Pericem é um cimento cirúrgico para uso após cirurgias periodontais, que oferece uma proteção local segura para feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas. O cimento é produzido por mistura de seus componentes (pasta base e pasta aceleradora) no momento do uso. A massa originada tem excelente textura e plasticidade após a presa e sabor de menta. Pericem não contém eugenol em sua composição, garantindo que seu uso não é irritante a mucosa oral..

### Composição

**Pasta Base:** Ácidos graxos, Resina natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de menta

**Pasta Aceleradora:** Óleo Mineral, Óleo vegetal, Óxido de Zinco, Óxido de Magnésio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de menta

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação

### Contra indicações

Não utilizar em pessoas sensíveis e com alergia conhecida ao timol.

### Modo de Usar

- Dispensar comprimentos iguais das duas pastas sobre uma placa de vidro ou bloco de mistura.
- Juntar as duas pastas e espatular até obter uma mistura de coloração rosa uniforme.
- Caso se deseje uma mistura mais consistente, pode-se adicionar uma pequena quantidade de Óxido de Zinco.
- Aguardar 2 a 3 minutos e então confeccionar um rolete com a massa.

Obs. Para evitar a aderência da massa, lubrificar os dedos com vaselina líquida.

Tempo de trabalho: 30 a 45 segundos / Tempo de presa: 2 a 3 minutos

### Advertência, cuidados especiais

Manter os tubos fechados.


### Armazenamento

Manter em temperatura ambiente. Conservar na embalagem original.

Uso exclusivo do cirurgião-dentista



Technew Com. Ind. Ltda  
CNPJ: 31.258.478/0002-20  
Industria Brasileira  
Resp. Técnico:  
Claudia B. R. Vidigal  
CRO/RJ 24678

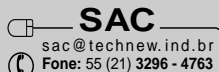

Reg. ANVISA 80015520035



**EUROTECHNEW Com. Imp. Exp.  
de Materiais Dentários Ltda**  
Rua do Volfrâmio, 160 - Canelas  
Vila Nova de Gaia - Portugal  
Phone: 351 22 712-3302  
info@eurotechnew.com



# Pericem

## Cemento Quirúrgico SIN EUGENOL

**Indicación:** Indicado como cemento periodontal para protección de las suturas originadas de cirugías periodontales

**Especificaciones técnicas:** Pericem es un cemento quirúrgico para uso después de cirugías periodontales, que ofrece una protección local segura para heridas quirúrgicas, manteniéndolas limpias. El cemento es producido por la mezcla de sus componentes (pasta base y pasta aceleradora) en el momento del uso. La masa originada tiene excelente textura y plasticidad después del fraguado y sabor de menta. Pericem no contiene eugenol en su composición, garantizando que su uso no es irritante a la mucosa oral.

**Composición:** Pasta Base: Ácidos grasos, Resina natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de menta  
Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo vegetal, Óxido de Zinc, Óxido de Magnesio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de menta

**Validez:** 3 años a partir de la fecha de fabricación

**Contra indicaciones:** No utilizar en personas sensibles y con alergia conocida al timol.

**Instrucciones de uso:** • Dispensar larguras iguales de las dos pastas sobre una placa de vidrio o bloque de mezcla.

- Juntar las dos pastas y espátular hasta obtener una mezcla de coloración rosa uniforme.
- Caso se desee una mezcla mas consistente, se puede adicionar una pequeña cantidad de Óxido de Zinc.
- Aguardar 2 hasta 3 minutos y entonces confeccionar un rollete con la masa.

Obs. Para evitar la adherencia de la masa, lubricar los dedos con vaselina líquida.

Tiempo de trabajo: 30 a 45 segundos / Tiempo de fraguado: 2 a 3 minutos

**Advertencia, cuidados especiales:** Mantener los tubos cerrados.

**Almacenaje:** Mantener en temperatura ambiente. Conservar en el empaque original.

Uso exclusivo del dentista

# Pericem

## Surgical Cement WITHOUT EUGENOL

**Indication:** It is indicated as periodontal dressing for the protection of sutures of periodontal surgeries.

**Technical specifications:** Pericem is a surgical cement to be used after periodontal surgeries, which offers a safe local protection for surgical wounds, keeping them clean. The cement is produced by the mixture of the components (base paste and accelerator paste) in the moment of use. The mass that is originated is of excellent texture and plasticity after set and has mint flavor. Pericem does not contain eugenol in its composition, assuring that its usage is not irritating to the oral mucosa.

**Composition:** Base Paste: Fatty acids, Natural rosin, Synthetic rosin, Mineral Oil, Thymol, Natural Wax and Mint Flavor  
Accelerator Paste: Mineral Oil, Vegetable Oil, Zinc Oxide, Magnesium Oxide, Iron Oxide Coloring, Thymol, BHT and Mint Flavor

**Validity:** 3 years from manufacture date

**Contraindications:** Do not use in person with known allergy to thymol

**Instructions for use:** • Dispense equal lengths of the two pastes over a glass plate or mixture pad.

- Mix the two pastes until a uniform pink color is obtained.
- In case a more consistent mixture is needed, a small amount of Zinc Oxide may be added.
- Wait for 2 to 3 minutes and make a roll with the mass.

Obs. To avoid the adherence of the mass, lubricate the fingers with mineral oil.

Working time: 30 to 45 seconds / Setting time: 2 to 3 minutes

Warning:  
Keep the tubes closed.

Storage: Keep in room temperature. Keep in the original packaging.

Exclusive for dentist's use